

樂普醫療

製造業者：深圳普滙醫療科技有限公司

醫療器材商：漢泰生醫科技股份有限公司

806613高雄市前鎮區嘉陵街40號1樓

經銷商：



樂普醫療  
普滙

科技呵護生命

**Procision™ 1000**

“樂普”波威外科手術超音波刀系統組

此手冊僅限於台灣使用




## Precision™ 1000


專業精密超音波手術刀，致力成為您可靠的合作夥伴。

以專業精神創造專業產品。  
以精密製造助力精確手術。

## 提升安全性

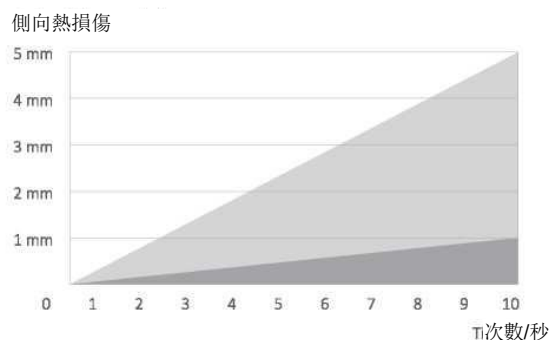

最小化側向熱組織損傷，在重要器官手術中更安全。降低術中結紮的機率並減少失血量。

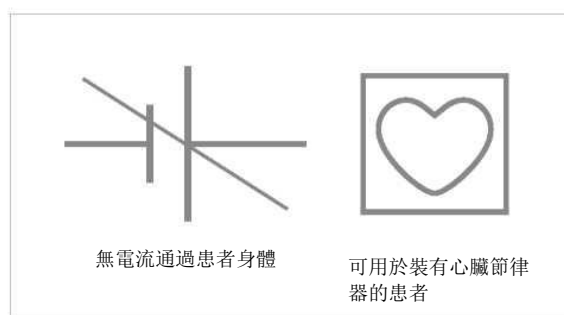


無電流通過患者身體，避免神經肌肉刺激，可安全用於裝有心臟節律器的患者。

## 高效能壓縮能量

- 安全：可控制器械尖端的能量方向
- 省時：使用單一器械即可完成切割和凝血
- 精確：以高觸覺回饋實現有效解剖和止血閉合



## 多功能性

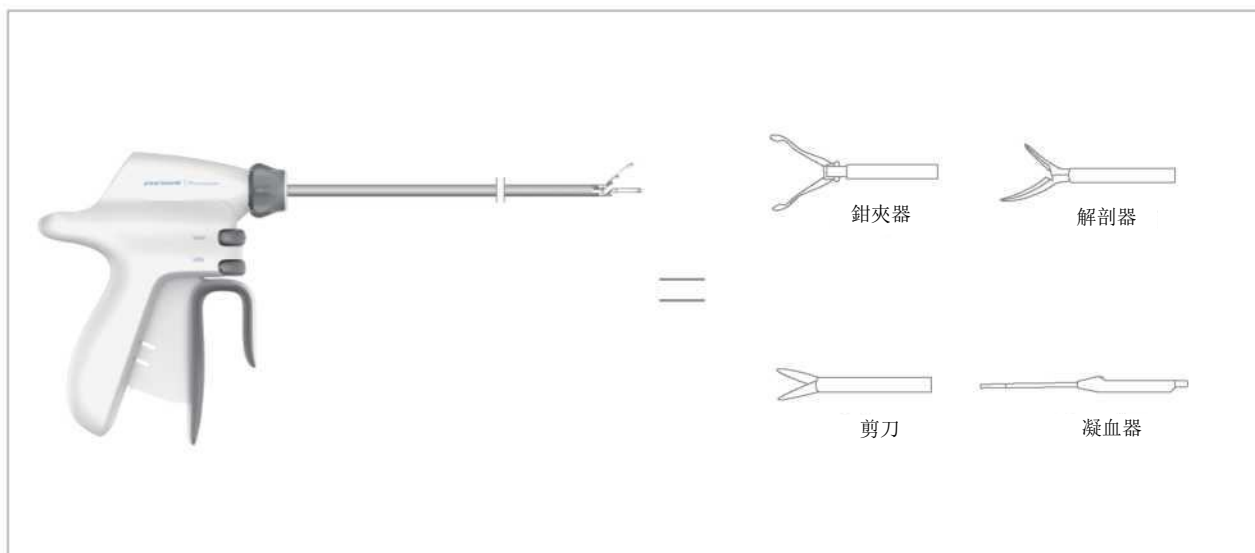

超音波手術刀具有多種功能，如凝血、切割、鉗夾、解剖等，因此可減少手術中更換器械的次數，縮短手術時間。

## 精確手術，簡便操作

人體工學設計的超音波刀-PR23/PR36



### 使用步驟

1. 按壓鉗口鞘桿並握住
2. 啟動（經由最小/最大手動啟動按鈕/腳踏開關）


### 應用領域

- 一般外科
- 上消化道
- 結腸直腸
- 肝胰膽
- 減肥手術
- 婦科
- 泌尿科
- 胸腔外科

### 優勢




刀桿方向旋鈕、控制按鈕和鉗口鞘桿的操作部分均採用柔軟橡膠材質。握把外殼採用流線型人體工學設計，握持操作舒適。

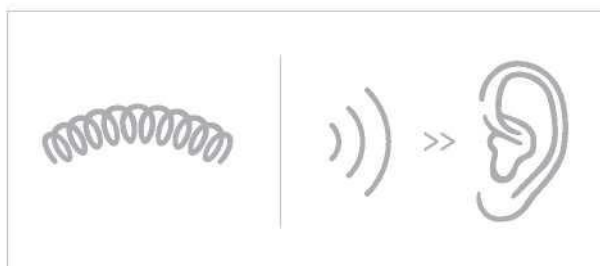

該器械配備夾持力緩衝裝置和聲音回饋，確保操作可靠。


### 精密組裝

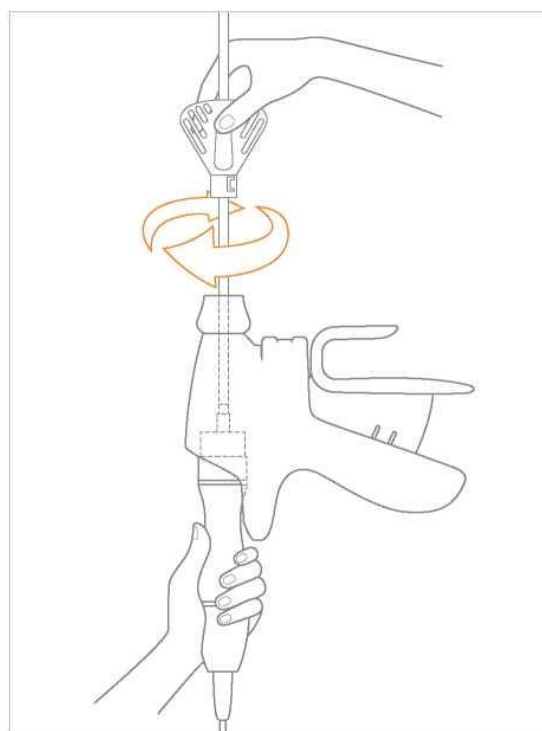


觸覺與聲音回饋，便於精確組裝。

## 訂購資訊

### 人體工學設計的超音波刀

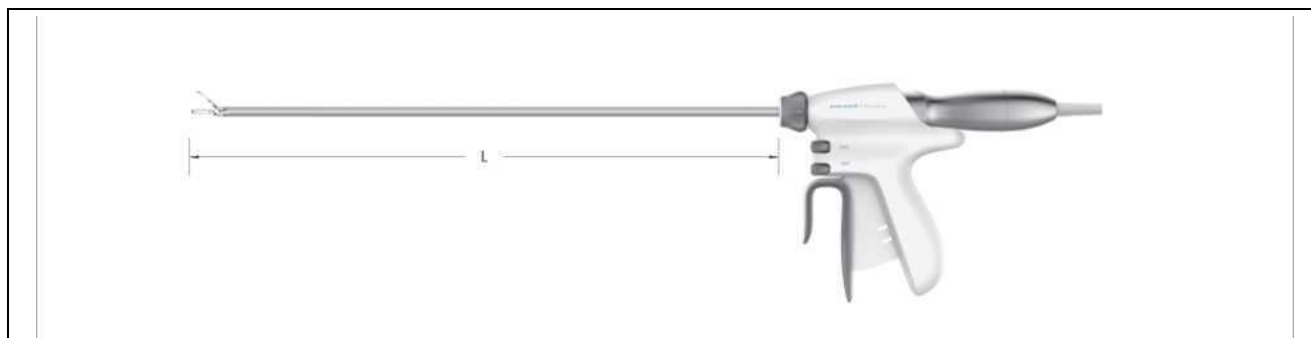


類型	長度	型號
刀頭（一次性，6 件/彩盒，24 件/包裝）適用於 3mm 血管	23 cm	PR23
	36 cm	PR36

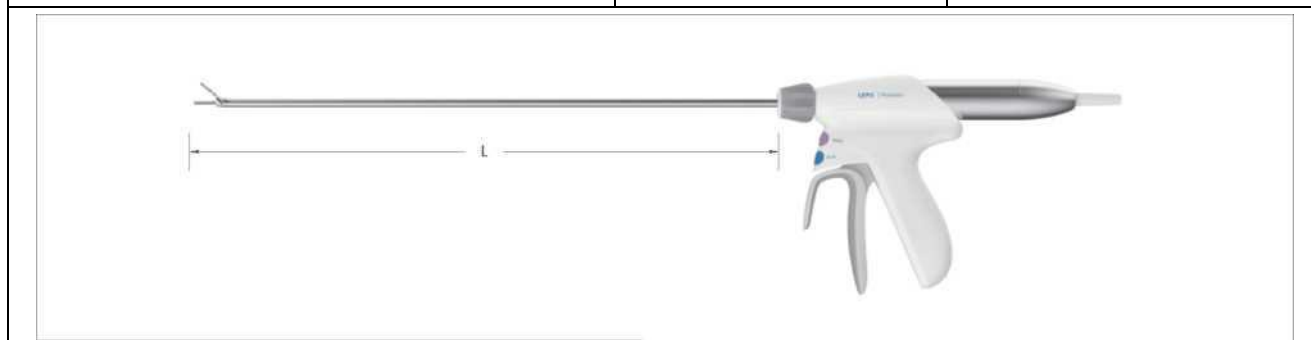

類型	長度	型號
刀頭（一次性，6 件/彩盒，24 件/包裝）適用於 5mm 血管	14 cm	PR14H
	23 cm	PR23H
	36 cm	PR36H

### 手柄

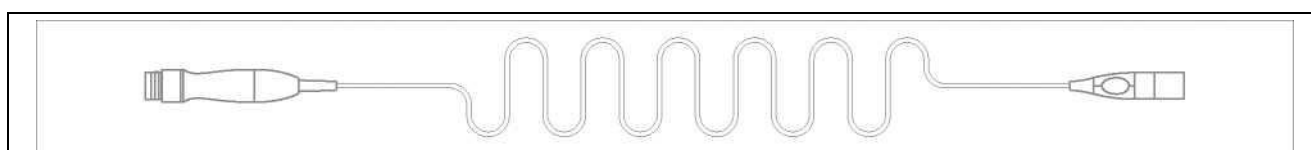



類型	長度	型號
手柄/傳感器（可重複使用）	3 m	HP18

### 主機

類型	型號
電源主機	Procision 1000

## 選配附件

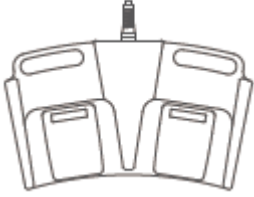	類型	型號
	腳踏開關	FS82
	腳踏開關	MKF 2IS

## 技術規格

### 技術數據摘要

### Procision 1000 電源主機

電源頻率	50/60HZ
電源電壓	100-240V~ (±10%)
主保險絲	T5AH 250V (數量: 2)
最大功率消耗	150VA
寬 × 高 × 深	350×355×136mm
重量	7.6kg
顯示螢幕	LCD, 7"
根據歐盟指令 93/42/EEC 的分類	IIb
根據 EN 60601-1 的保護等級	1
根據 EN 60601-1 的類型	CF
輸出頻率	55.5±0.5KHz
輸出功率	最大 35W

### 儲存及運輸的環境條件

溫度	-35°C 至 + 54°C
相對濕度	10% 至 80%
大氣壓力	70 kPa 至 106 kPa

### 操作的環境條件

溫度	+15°C 至 + 27°C
相對濕度	30% 至 75%
大氣壓力	70 kPa 至 106 kPa